Simple® pro | ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97
Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com
info@simple-pro.com

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№: РОСС RU.МН33.Н00113

Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023

№ 2224974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Центр сертификации и исследований "Метрополь", Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № RA.RU.11МН33, Телефон 8(495)223-63-87, адрес электронной почты metronom_aa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной). См. приложение на 5 листах (бланки № 0003533, 0003534, 0003535)

Серийный выпуск. Продукция изготовлена по ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

код ОК 005 (ОКП): ОК 034-2014 (ОКПД 2) 31.09.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

код ТН ВЭД России: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403901100; 9403890000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804158696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195009, РОССИЯ, г ОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-283И-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательных лабораторий промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80, протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО, рег. № RA.RU.21ШЛ96, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ.AA15.B.00232, № TC RU C-RU.АТ21.В.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия на изделии и в товаросопроводительной документации.

Схема сертификации – 3с

Руководитель органа _____ А.И. Бабаева

Эксперт _____ С.А. Бобровская

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403301100; 9403890000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" рег. № RA.RU.21ИН96; № 678-1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны хранить в крытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 **включительно**

М.П. КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00383/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020



Стул лабораторный GEMA
ГОСТ 19917-2014

1. Назначение

Стул лабораторный модели GEMA предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Габаритные размеры изделия в сборе, мм:

- Диаметр – 640 мм.
- Высота – 500…690 мм.
- Размер сиденья – 460х450 мм, спинки – 305х400 мм.
  Материал сиденья и спинки – мягкий литой полиуретан чёрного цвета.
- Угол наклона спинки регулируется с помощью пиастры, максимальный угол наклона 35°.

Масса – не более 8 кг.

2.2. Описание

Сиденье и спинка стула изготовлены из полиуретана, позволяющего работать в агрессивных средах, а так же в условиях знакопеременных нагрузок и температур. Основой изделия является пластиковое пятилучье на пластиковых опорах, фиксирующее в вертикальном положении металлический газлифт.
Пятилучье комплектуется на выбор пластиковыми роликами, либо стационарными опорами.

2.3. Комплектация

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Высокий газлифт (регулировка по высоте 570…820 мм);
- Хромированное пятилучье;
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Прорезиненные ролики;
- Стационарные опоры (как дополнительный комплект к пластиковым роликам);
- Подлокотники.

3. Комплект поставки

№	1	2	
Наименование	Пятилучье пластиковое	Пластиковые ролики	Стационарные опоры
			
Кол-во	**1 шт.**	**5 шт.**	
№	**3**	**4**	**5**
Наименование	Газлифт	Сиденье с механизмом регулировки в сборе	Спинка в сборе
			
Кол-во	**1 шт.**	**1 шт.**	**1 шт.**


4. Подготовка к сборке

4.1. Распаковать стул, проверить целостность покрытия;
4.2. Проверить комплектность;
4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

Конструкция I	Конструкция II
	

Установка подлокотников

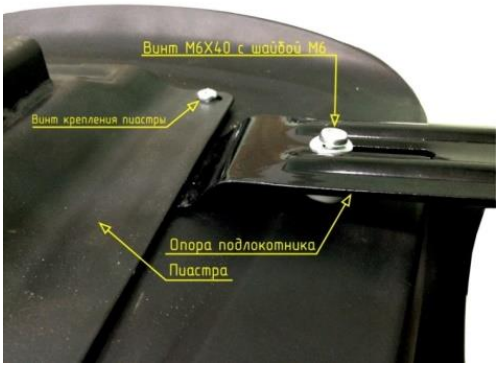



6. Инструкция по сборке стула

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

6.1. Присоединить спинку стула к сиденью, зафиксировав пластиковым винтом с шайбой 10 из комплекта (Конструкция I).

6.2. Вставить в пятилучье опоры и газлифт (Конструкция II).

6.3. Соединить конструкцию I с конструкцией II.

7. Инструкция по обслуживанию

Уборка пыли, грязи с поверхностей стула с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

8.1. Стул должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 80%.

8.2. Сиденье и основание изделия устойчивы к воздействию щелочных моющих бытовых средств, а также к санитарно-гигиеническим моющим средствам, допустимым для каждого вида материалов индивидуально.

8.3. Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг.

8.4. Недопустимо прикладывать какие-либо усилия, направленные на излом сиденья *(Рис. 1)*.

При изломе сиденья в этой зоне такой случай считается не гарантийным и претензии по нему не принимаются.



Рис. 1. Зона нагрузки на излом

Свидетельство о приёмке:

Стул лабораторный GEMA

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

_____/_____/_____

Подпись Расшифровка Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°С до +35°С и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°С, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°С – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°С.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. **Отгрузка товара**

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

1.3. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.